

Projection ID ACR

Projection

Angle du bras Tissu Visualisé Face crânio-caudale


CC

Sup-Inf

0°

Parties antérieure, centrale,

médiale et postéro-médian du sein

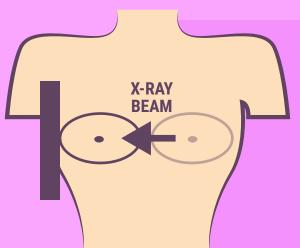

Projection
ID ACR
Projection
Angle du bras
Tissu Visualisé

Profil externe Médio-latéral

ML


Med-Lat

90°

Quadrants supéro-externe et

inféro-externe du sein



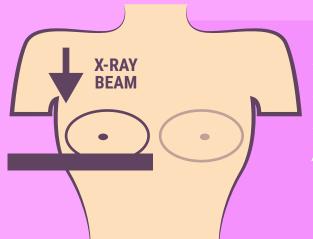


Projection
ID ACR
Projection
Angle du bras
Tissu Visualisé

Face crânio-caudale exagérée en externe

XCCL Sup-Inf

0°

Tissu mammaire latéral

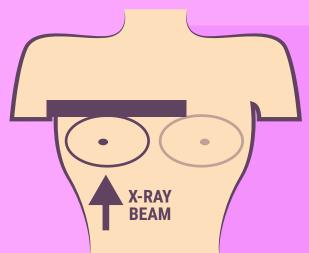

Projection
ID ACR
Projection
Angle du bras
Tissu Visualisé

Face caudo-crâniale


FB

Sup-Inf

0°

Central et médial



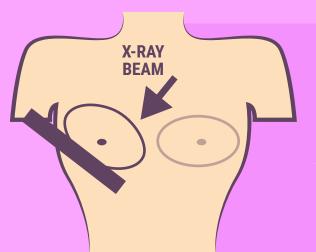


Projection Oblique médio-latérale ID ACR MLO

Projection SM-IL

Angle du bras 30° - 60°

Tissu Visualisé Quadrant postérieur, supéro-externe,

creux axillaire, quadrant inféro-interne

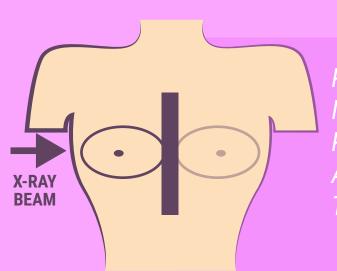

Projection Profil interne latéro-médial


ID ACR LM

Projection Lat-Med Angle du bras 90°

Angle du bras 9 Tissu Visualisé M

Montre les détails des lésions médiales



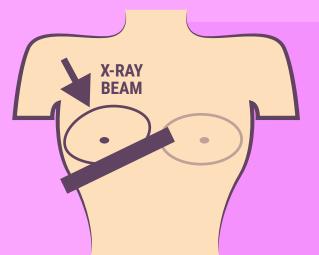

Projection ID ACR

Projection

Angle du bras

Tissu Visualisé

Oblique superolatérale à inféromédiale


SIO

SL-IM

1° - 90°

Quadrant postérieur, médial, supéro-interne,

quadrant inféro-externe

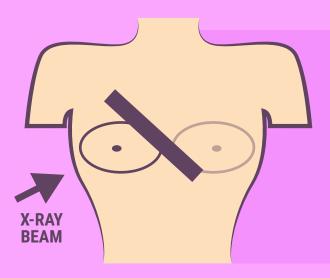

Projection

ID ACR

Projection

Angle du bras

Tissu Visualisé

Oblique inférolatérale à superomédiale

LMO


IL-SM

90° - 180°

Quadrant postérieur, médial, supéro-externe,

quadrant inféro-interne



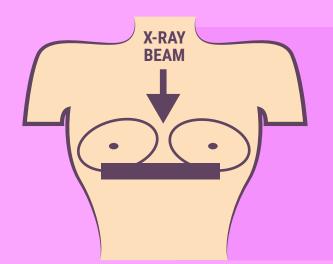

Projection Incidence de double-sein

0°


ID ACR CV

Projection Sup-Inf

Angle du bras

Tissu Visualisé Quadrants médiaux des deux seins

sur la même image

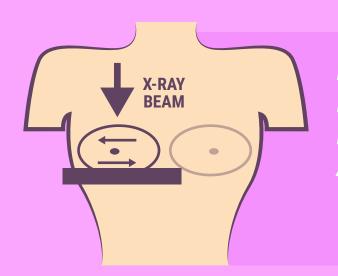

Projection Latérale roulée / Médiale roulée

ID ACR RL / RM

Projection Med-Lat

Angle du bras 90°

Tissu Visualisé Tissu sous-aréolaire, central, médial

et postéro-médial